

КОНТЕЙНЕР ЗАЩИТНЫЙ “TISSA-RP” ДЛЯ СБОРА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИГЛ

TISSA

TMRP-03.02.04



ОПИСАНИЕ

Контейнер защитный “TISSA-RP” предназначен для сбора использованных игл от шприцев с РФП и защиты персонала от ионизирующего излучения.

Контейнер выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Корпус контейнера по всей площади экранирован защитным материалом (свинец). В крышке контейнера установлено устройство для снятия игл со шприца.

Для удобства перемещения контейнер имеет откидные ручки. В зависимости от требуемой толщины защиты, габаритные размеры контейнера могут быть изменены.


ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Габаритные размеры контейнера
Внутренние размеры контейнера
Толщина свинцовой защиты
Материал наружной отделки
Материал внутренней отделки
Масса изделия (не более)

200(Д)х210(Ш)х250(В)
160(Д)х140(Ш)х160(В) мм
10 мм
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
12 кг

Примечание: Основные параметры могут быть изменены согласно техническому заданию заказчика



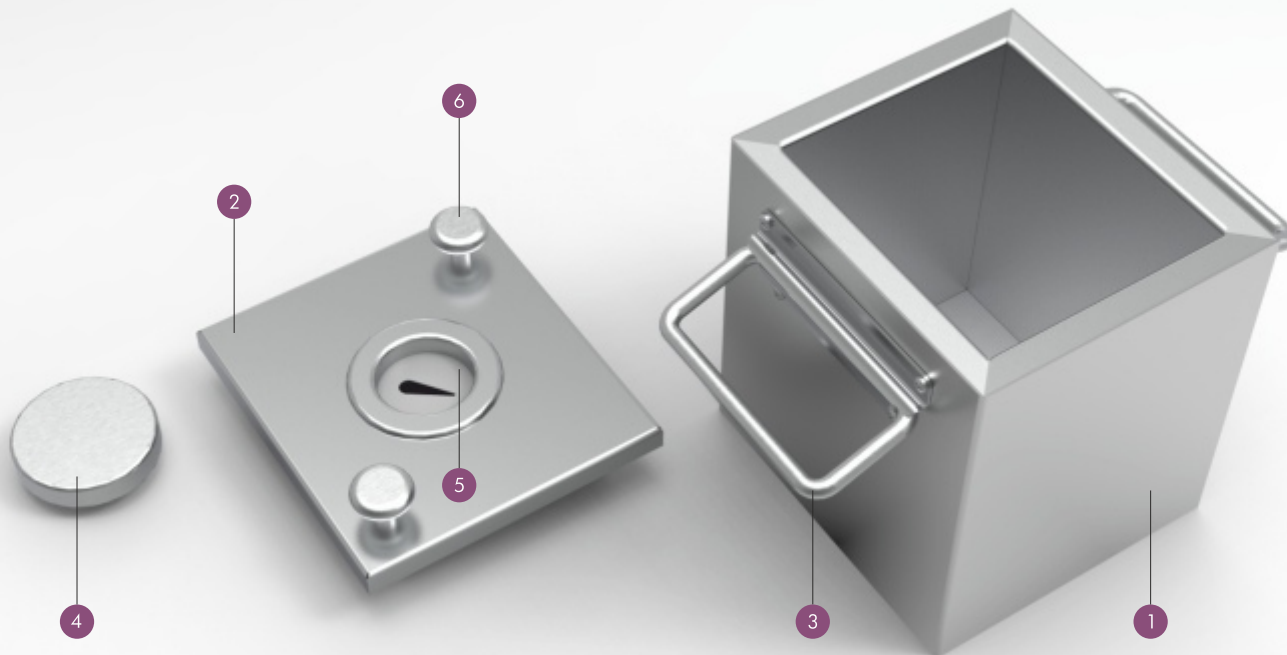

ТИПОВАЯ СХЕМА КОНТЕЙНЕРА ЗАЩИТНОГО (ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО МАТЕРИАЛА 10 ММ)

- 1 – Корпус контейнера
- 2 – Крышка контейнера
- 3 – Складные ручки для перемещения контейнера
- 4 – Крышка устройства для снятия игл
- 5 – Устройство для снятия игл
- 6 – Ручки крышки контейнера

